

BENOIT SYSTEMES

LIGHT DRIVE 3 LIGHT DRIVE 3 XL

(MINOTOR 3 / MINOTOR 3 XL)

GEBRAUCHSANWEISUNG

September 2025






← Folgen Sie uns!

1 ANTRIEB MONTIEREN


Ihr Rollstuhl wurde mit **Profilen und Haken** ausgerüstet, mit denen sich der Antrieb sehr schnell montieren lässt.

1. Ziehen Sie die Bremsen des Rollstuhls an, um die Montage zu erleichtern.
2. Heben Sie den Antrieb am oberen Griff an und legen Sie die Achsen auf die Haken.
3. Lassen Sie den Griff los und prüfen Sie, ob der Antrieb an den Haken verriegelt ist.

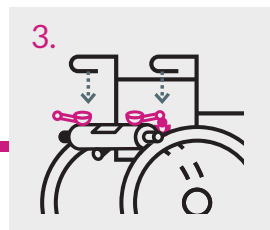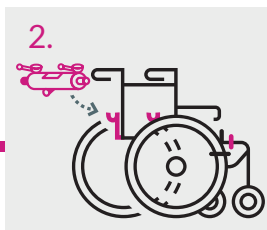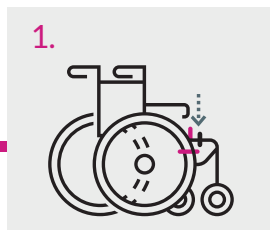

2 HEBEL DREHEN ZUM EINKUPPELN

1. Ziehen Sie die Teleskophebel aus, um Ihre Kraft zu vervielfachen.
2. Kuppeln Sie beide Seiten ein.

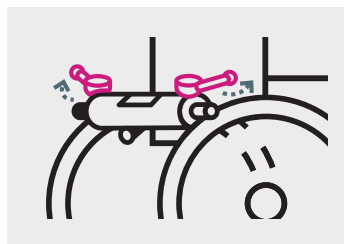

Sie können den Antrieb auskuppeln und den Rollstuhl wieder ganz normal von Hand fahren.

VOM MOTORBETRIEB IN DEN HANDBETRIEB




- ① Ziehen Sie die Griffe aus.
- ② Drehen Sie die Griffe bis zum Anschlag.

3 BEDIENGERÄT POSITIONIEREN

Eine **Gleitschiene** wurde vorne am Rollstuhl oder unter der Armlehne montiert, um das Bediengerät aufzunehmen.



1. Stecken Sie die Verlängerung in die Gleitschiene.
2. Führen Sie das Kabel innen unter der Sitzfläche entlang, damit es nicht am Rad scheuert.

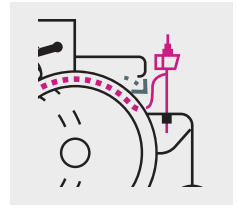

Um das Bediengerät wegzuklappen, drücken oder ziehen Sie den Knopf an der Gleitschiene. Heben Sie es bis zum Anschlag an, um es wieder in die Ausgangsposition zu bringen.

4 AKKU EINSETZEN


1. Schieben Sie den Akku in die Gleitschienen unter dem Antrieb.
2. Drücken Sie den Akku kräftig hinein, bis er einrastet («Klick»).

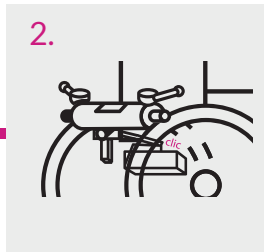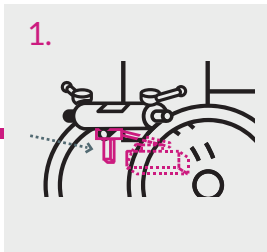

5 KIPPSCHUTZ ANBRINGEN

1. Klipsen Sie den Kippschutz in den hinteren Griff ein.
2. Prüfen Sie die Einbaurichtung (Rolle nach unten) und ob der Haltestift eingerastet ist.

Ihr Antrieb ist nun einsatzbereit!

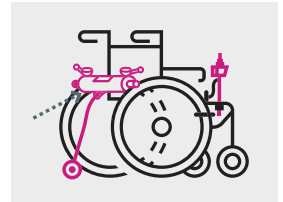

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

Damit Ihr Antrieb einwandfrei funktioniert und lange hält, beachten Sie bitte folgende Hinweise:



Laden Sie den Akku nach jedem Nutzungstag.

- ⓘ Akku zum Laden einschalten*.

*Weitere Angaben finden Sie im Akku-Handbuch.



Pumpen Sie die Reifen regelmässig auf. Der Betriebsdruck muss zwischen 6 und 8 bar liegen.






Reinigen Sie regelmässig die Antriebsrollen.

Folgen Sie **unserem YouTube-Kanal** für regelmässige Tipps.

6 ANTRIEB ABNEHMEN


1. Ziehen Sie die Bremsen des Rollstuhls an.
2. Lassen Sie die Hebel am Rollstuhl eingekuppelt.
3. Nehmen Sie den Kippschutz ab.
4. Fassen Sie den Akku am Griff und ziehen Sie ihn nach hinten heraus.
5. Nehmen Sie das Bediengerät ab und stecken Sie es in die Aufbewahrungsschiene unter dem Antrieb.
6. Kuppeln Sie den Antrieb aus, indem Sie die Hebel drehen.
7. Heben Sie den Antrieb am oberen Griff an.

 Der Antrieb lässt sich nur abnehmen, wenn der obere Griff angehoben wird.

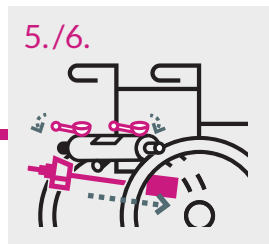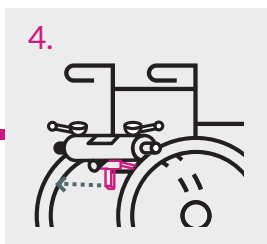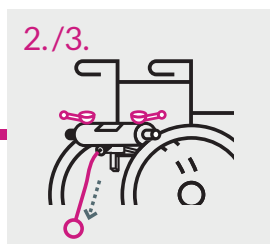


7 AKKU LADEN

Wenn der Akku am Rollstuhl ist, stecken Sie den runden Stecker des Ladegeräts unten am Joystick ein.

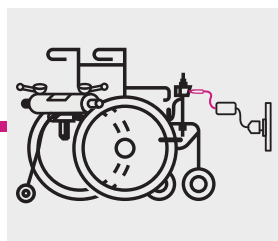

Wenn der Akku abgenommen ist, schliessen Sie das Ladegerät am roten Anschluss an.

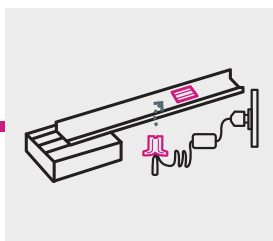

WARTUNGS- HEFT UND AKKU- HANDBUCH BEACHTEN

für Hinweise zu
Fahrbetrieb, Sicherheit
und Wartung

Schliessen Sie danach das Ladegerät am Stromnetz an.
Trennen Sie es nach vollständiger Ladung.

Dieses Medizinprodukt ist ein reguliertes Gesundheitsprodukt und trägt gemäss diesen Vorschriften die CE-Kennzeichnung. BENOIT SYSTEMES erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt ein Medizinprodukt der Klasse I ist und die Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte erfüllt.

📍 7 Rue du Pont, 21450 Billy-lès-Chanceaux FRANCE
☎ (+33) 3 80 96 51 25 | @ contact@benoitssystemes.com

WWW.BENOITSYSTEMES.COM